




Contour[®] plus ONE[»]

Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Zobrazení tendencí krevního cukru pomocí aplikace **CONTOUR™DIABETES**




Provedení jakýchkoliv změn léčby, diety nebo cvičení je vždy třeba konzultovat s poskytovatelem zdravotní péče.

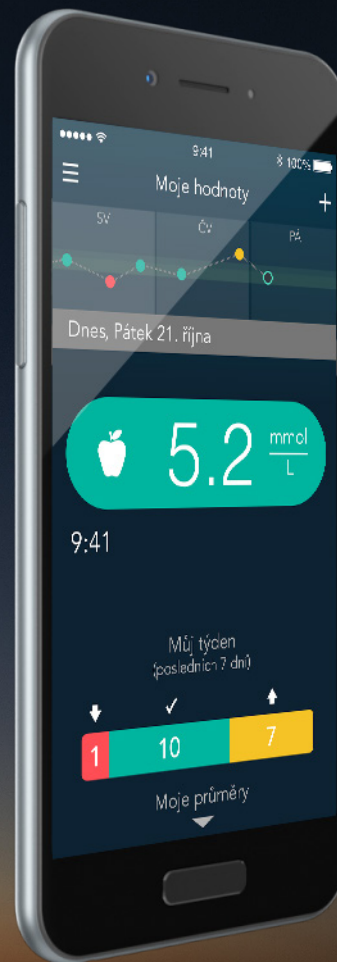

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Funkce **Moje tendence** dokáže identifikovat konkrétní tendence a charakteristiku odečtených hodnot vaší krevní glukózy a upozorňovat na jejich možné příčiny.

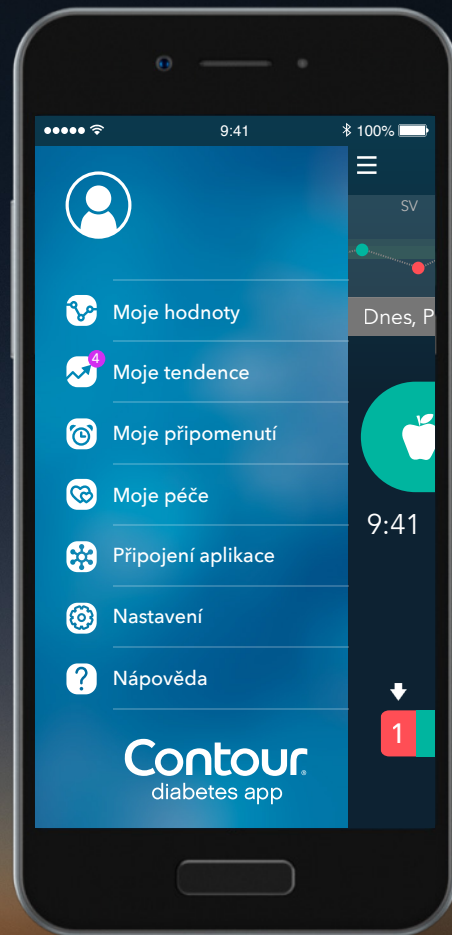


Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Tendence

Jakmile aplikace
CONTOUR DIABETES
zjistí tendenci, obdržíte
zprávu **Byla zjištěna
nová tendence.**

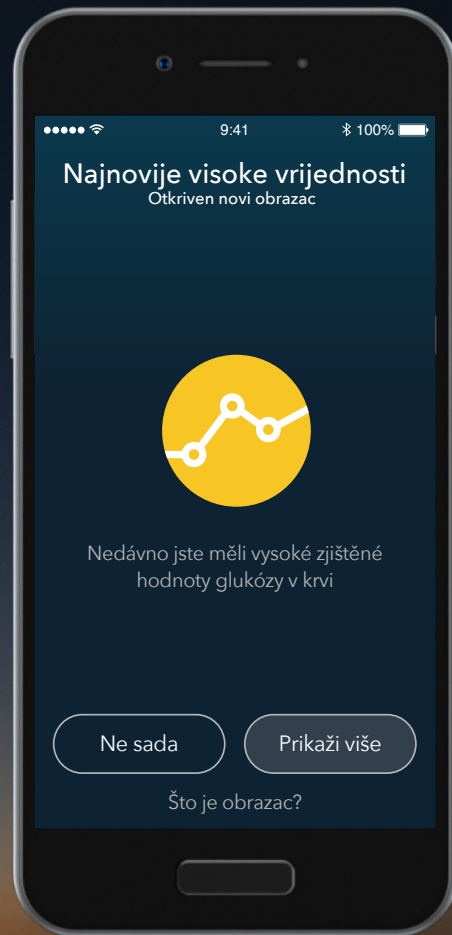


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Tendence

Jakmile aplikace **CONTOUR DIABETES** zjistí tendenci, obdržíte zprávu **Byla zjištěna nová tendence.**


Poklepáním na položku **Zobrazit více** zjistíte více informací o dané tendenci.

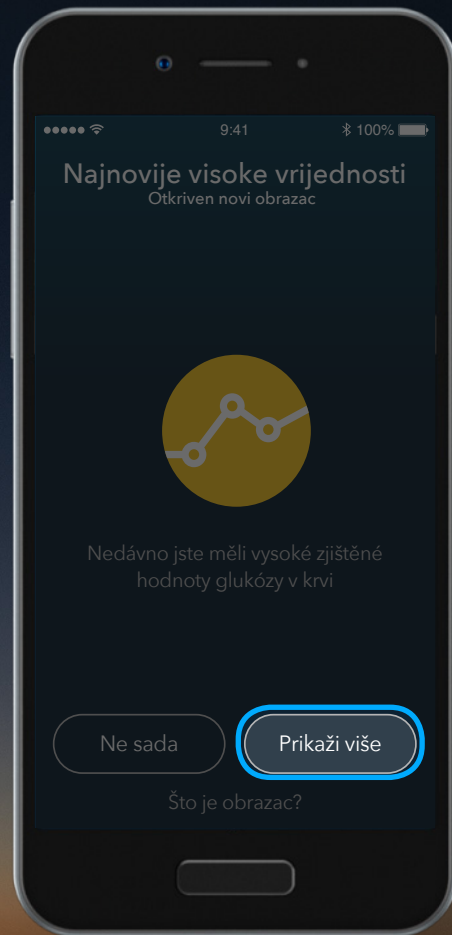

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2. Tendence

Tendence **Nedávné vysoké hodnoty** uvádí, že vaše 3 poslední měření krevního cukru byly nad vámi stanoveným cílovým rozsahem.

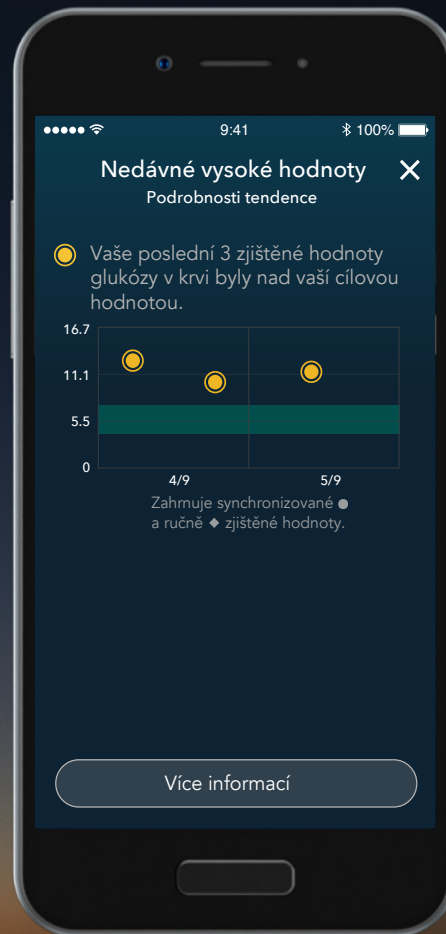

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2. Tendence

Tendence **Nedávné vysoké hodnoty** uvádí, že vaše 3 poslední měření krevního cukru byly nad vámi stanoveným cílovým rozsahem.


Po stisknutí **Zjistit více** si přečtete informace o možných příčinách.



Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3. Tendence


Pokud znáte příčinu vysokých naměřených hodnot, můžete ji zde vybrat.

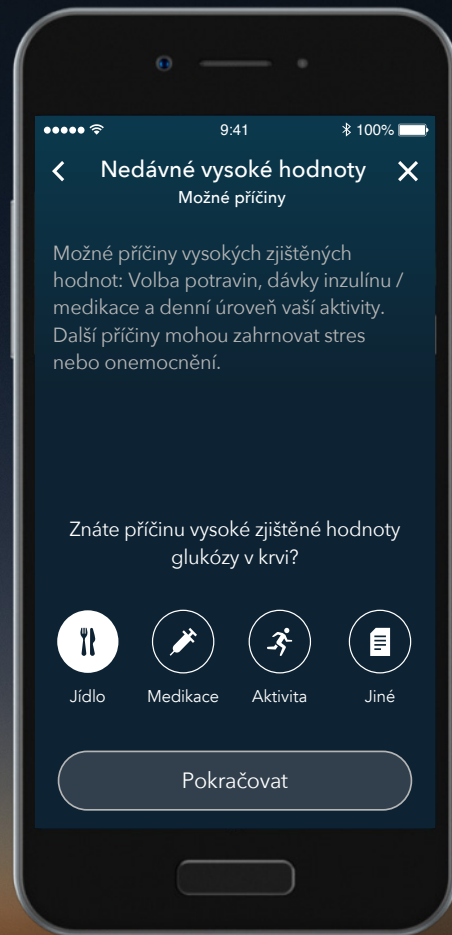

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3. Tendence


Pokud znáte příčinu vysokých naměřených hodnot, můžete ji zde vybrat.

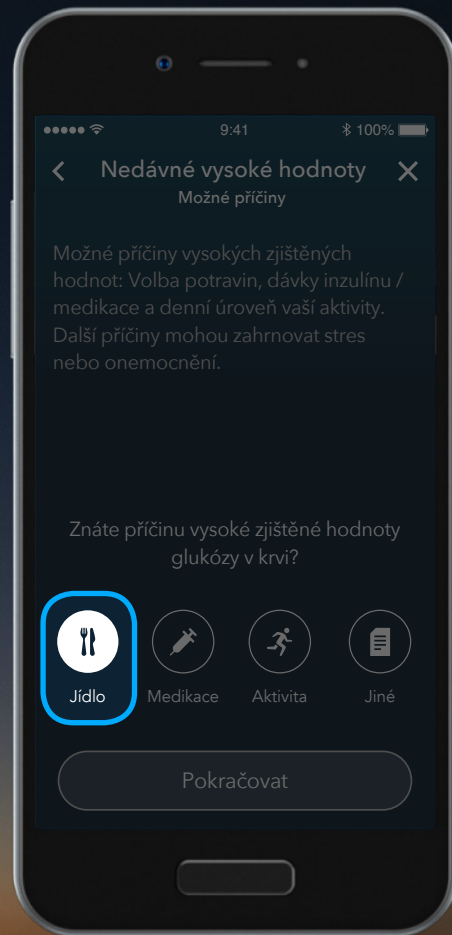

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

4. Moje tendence

Aplikace **CONTOUR DIABETES** poskytuje informace o možné příčině této tendence.

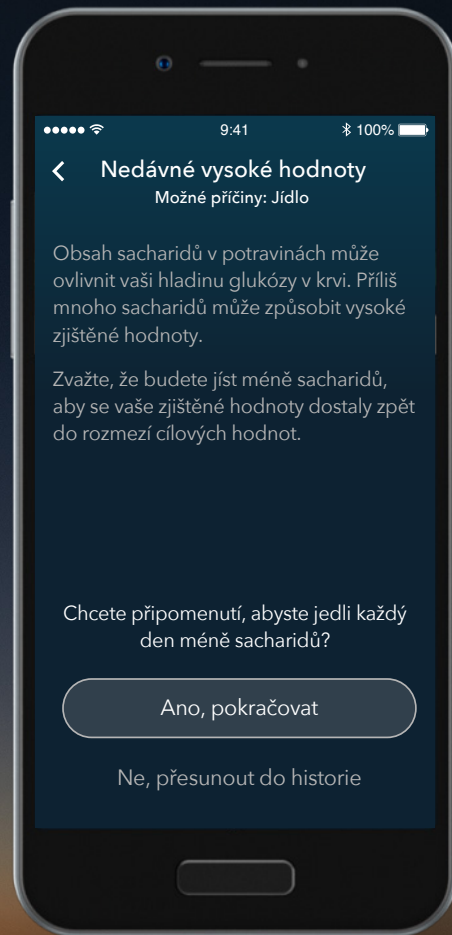


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

4. **Moje tendence**

Aplikace **CONTOUR DIABETES** poskytuje informace o možné příčině této tendence.


Stisknutím **Ano, pokračovat** nastavíte každodenní připomínání přísunu menšího množství uhlohydrátů.

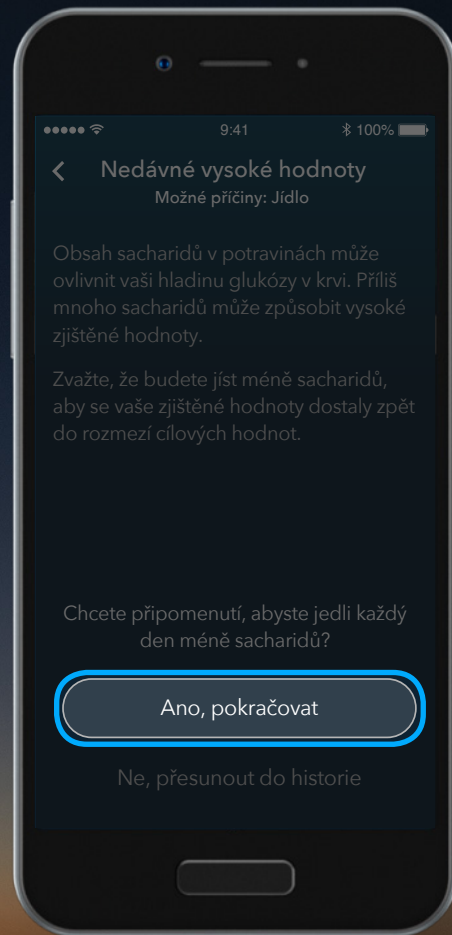

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

5. Moje tendence

Pomocí kolečka vyberte čas každodenního připomínání přísunu menšího množství uhlohydrátů.

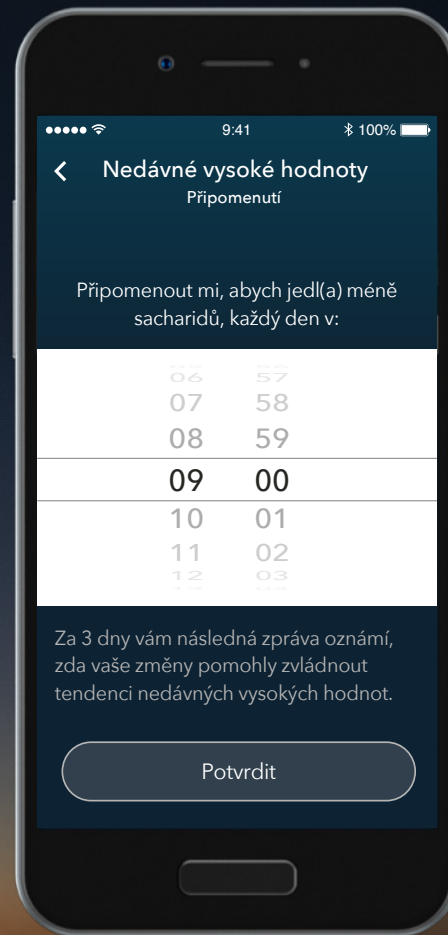


Contour[®]
plus **ONE**[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

5. Moje tendence

Pomocí kolečka vyberte čas každodenního připomínání přísunu menšího množství uhlohydrátů.


Stisknutím **Potvrdit** vyberte čas.

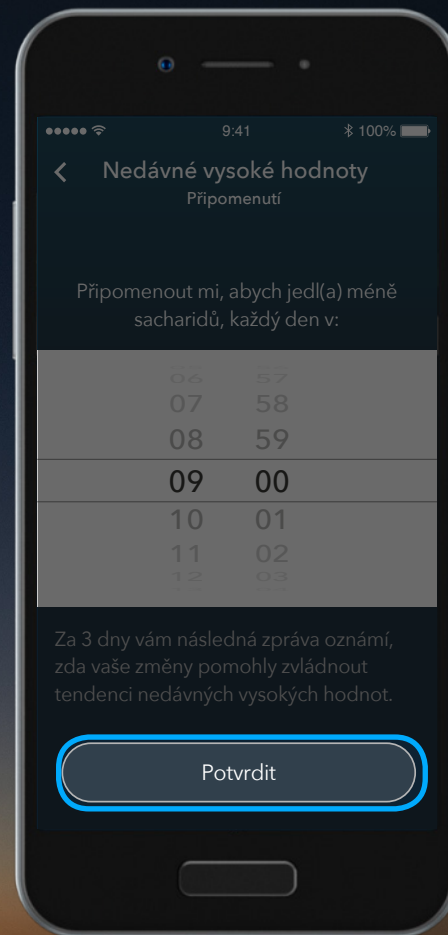

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

6. Tendence


Připomenutí se zobrazí ve vybranou dobu.

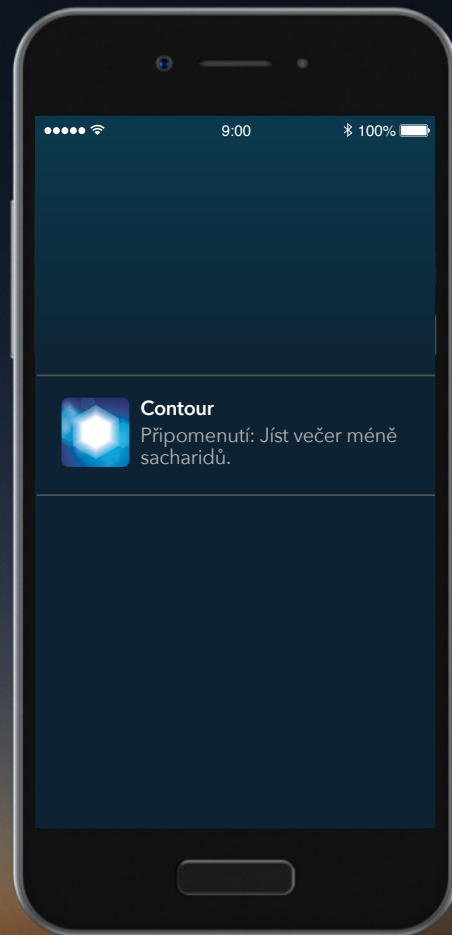

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

6. Tendence


Připomenutí se zobrazí ve vybranou dobu.

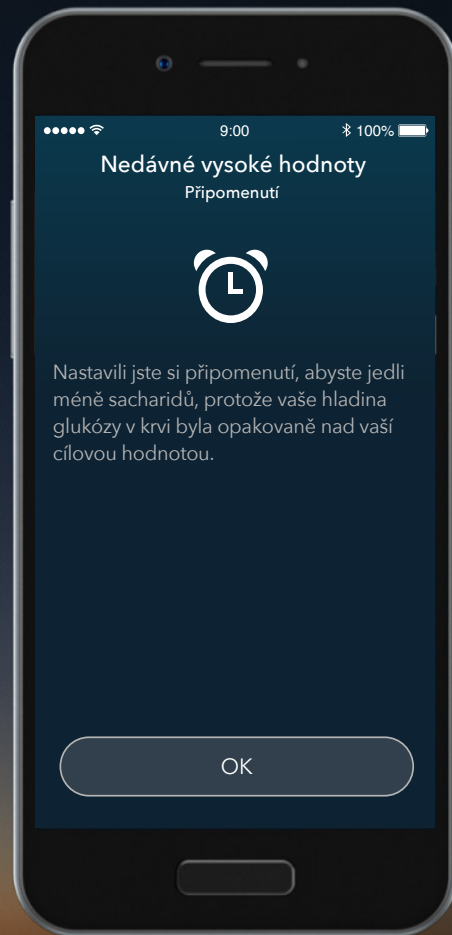

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

7. **Moje tendence**

Za 3 dny se v následné zprávě dozvíte, zda provedené změny pomohly zvládnout tendenci **Nedávné vysoké hodnoty**.

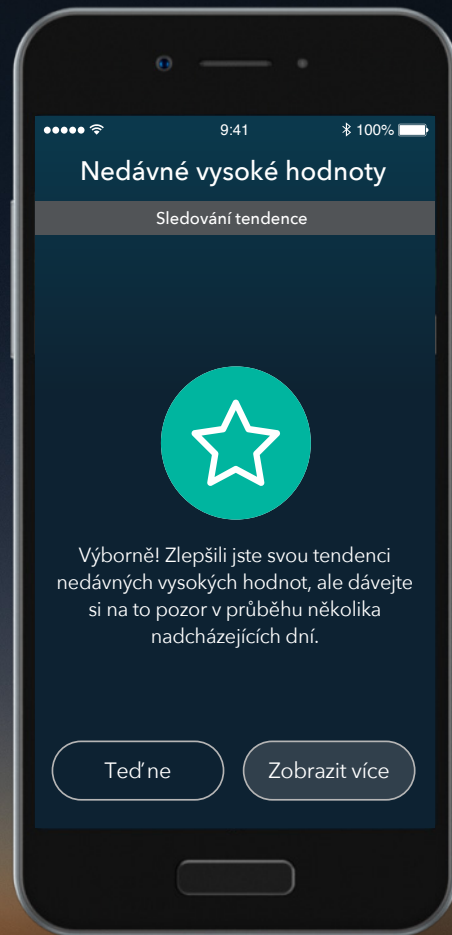


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

7. **Moje tendence**

Za 3 dny se v následné zprávě dozvíte, zda provedené změny pomohly zvládnout tendenci **Nedávné vysoké hodnoty**.


Více informací se dozvíte poklepáním na položku **Zobrazit více**.

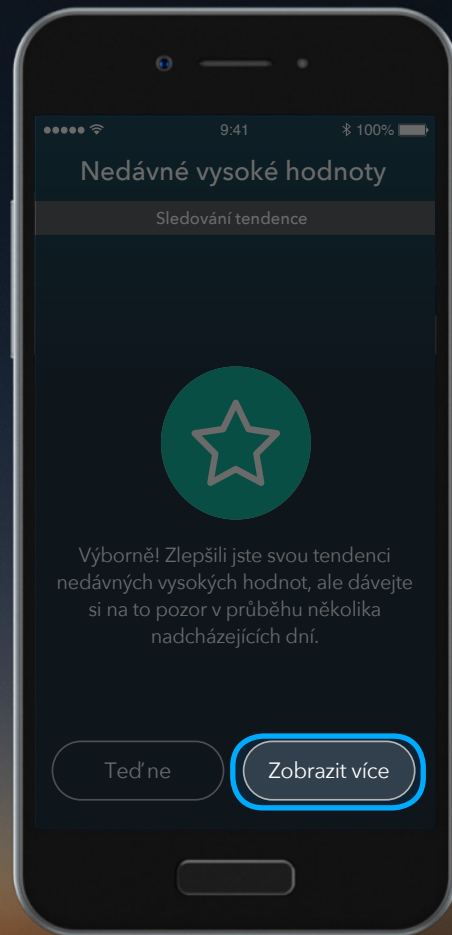

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

7. Tendence


Tato tendence byla přesunuta do vaší historie a lze ji kdykoliv zobrazit výběrem položky **Moje tendence** z **Hlavní nabídky**.

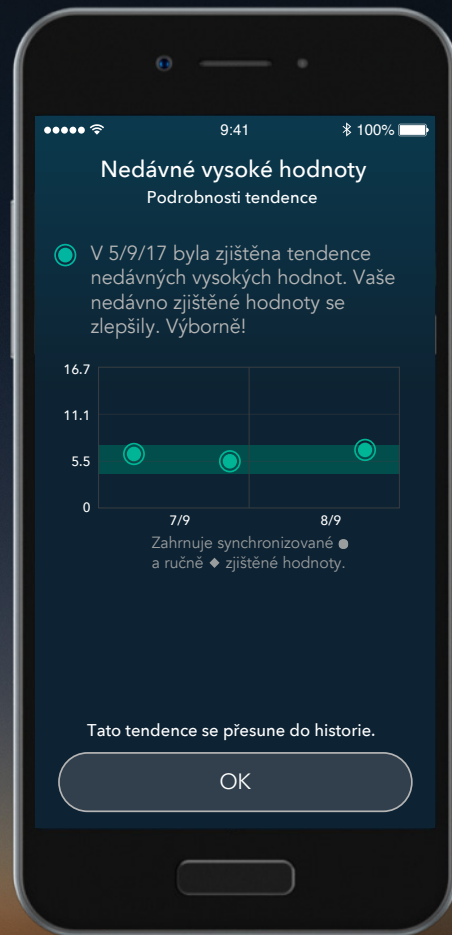

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

8. Tendence


Ke svým tendencím se dostanete kdykoliv v **Historii tendencí** a můžete sem přidávat další poznámky k možným příčinám této tendence, což vám pomůže při dalších konzultacích se svým zdravotním odborníkem.

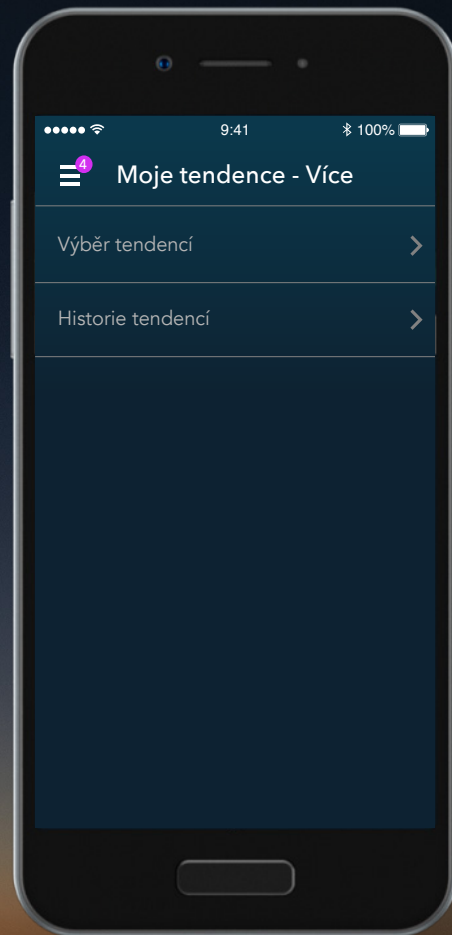

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

8. Tendence

Ke svým tendencím se dostanete kdykoliv v **Historii tendencí** a můžete sem přidávat další poznámky k možným příčinám této tendence, což vám pomůže při dalších konzultacích se svým zdravotním odborníkem.

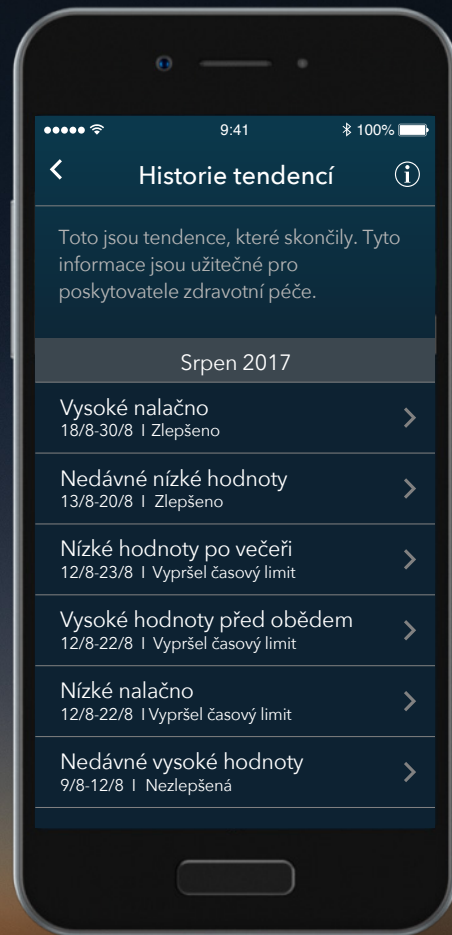

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Pokud máte dotaz ohledně glukometru **CONTOUR®PLUS ONE** nebo aplikace **CONTOUR™DIABETES**, poraďte se svým zdravotním odborníkem a postupujte podle uživatelské příručky.

Více informací o dostupnosti těchto produktů ve vašem státě, naleznete na adrese **diabetes.ascensia.com**.



Hypotetická data pacienta pouze za účelem předvedení. Provedení jakýchkoliv změn léčby, diety nebo cvičení je vždy třeba konzultovat s poskytovatelem zdravotní péče.



Značka Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. Slovní značka a logo Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek je předmětem licence. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care a Contour jsou ochranné známky popř. registrované ochranné známky společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Datum zpracování: Únor 2018 Kód: G.DC.10.2017.52579

© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena.



**Contour
plus ONE**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

diabetes.ascensia.com

